



Sonická zubná kefka so súpravou koncoviek a rukoväťou Bitvae D2

Návod na obsluhu




Funkcie

- Vodotesný a protišmykový dizajn
- Vymeniteľné hlavice kefky s jedinečným 3D tvarom štetín a pripomienkou výmeny štetín, ktoré pomáhajú udržiavať belšie a zdravšie zuby
- Vysokofrekvenčné vibrácie účinne odstraňujú zubný povlak, zabezpečujú hĺbkové čistenie zubov a ďasien a zabraňujú zápalu ďasien
- Nabíjanie cez USB, vhodné na cestovanie a kompatibilné s napätím
- Funkcia upozornenia na nízke nabitie, keď je napätie batérie nízke, indikátor bude rýchlo blikať alebo sa zubná kefka nebude môcť zapnúť
- 2-minútový inteligentný časovač s intervalovou pauzou, ktorý vám každých 30 sekúnd pripomenie zmenu miesta čistenia zubov

Popis produktu

- 1 - Hlava kefy
- 2 - Tlačidlo napájania
- 3 - Biely režim
- 4 - Čistý režim
- 5 - Mäkký režim
- 6 - Poľský režim
- 7 - Režim starostlivosti o ďasná
- 8 - Indikátor nabíjania
- 9 - Nabíjací port

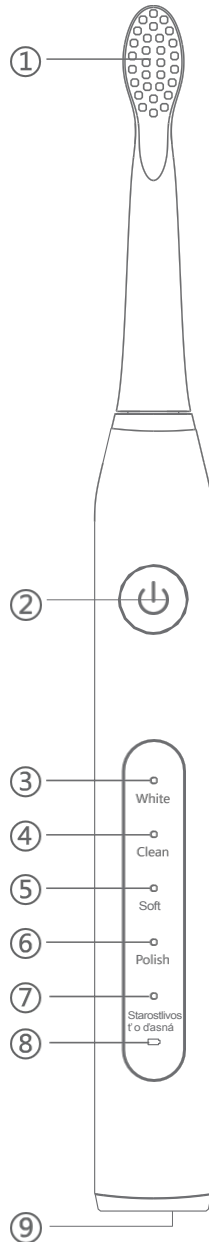


Návod na použitie

Používanie zubnej kefy

- Hlavu kefy zasunúte do držiaka a uistite sa, že je zaistená.
- Zubnú kefkou zapnete stlačením tlačidla napájania.
- Medzi 5 režimami ("White", "Clean", "Soft", "Polish" a "Gum Care") sa prepína nepretržitým stláčaním tlačidla napájania.
- Navlhčíte štetiny a naneste na kefkou primerané množstvo zubnej pasty.
- Priložte štetiny zubnej pasty pod miernym uhlom k línii ďasien.
- Zubnou kefkou jemne prechádzajte po predných, zadných a všetkých žuvacích plochách zubov. Zubná kefka by mala kĺzať po zuboch s minimálnym tlakom. Nevytvárajte príliš veľký tlak na zuby/ďasne ani neprikladajte štetiny na jednu oblasť ústnej dutiny na dlhší čas.
- Zubná kefka má 2-minútový inteligentný časovač, pretože to je podľa zubných lekárov optimálny čas na čistenie zubov, a po každých 30 sekundách sa zobrazí upozornenie, aby ste prešli na inú časť úst.
- Keď pocítite prestávku, prejdite na ďalšiu časť. Zubná kefka sa po 2 minútach automaticky vypne.
- Aby ste zabránili postriekaniu zubnou pastou, zapnite zubnú kefkou až po priložení k zubom a vyberte ju z úst až po vypnutí.

Výmena hlavy zubnej kefy

- Montáž: Uistite sa, že bod na lište hlavy kefy je vedľa šípky a tlačidlá kefy smerujú rovnakým smerom. Zarovnajzte hrot s drážkou na rukoväti kefy. Stlačte ho, kým nezacvakne na miesto, a potom ho otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistil.
- Demontáž: Pevne držte rukoväť zubnej kefy, otáčajte hlavou kefy proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nedostane do koncového bodu.

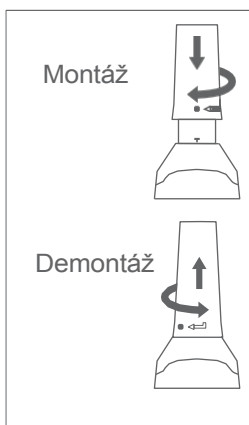

Nabíjanie zubnej kefky

- Ak je batéria zubnej kefky pri prvom zapnutí vybitá, pred použitím sa uistite, že je úplne nabitá.
- Ak sa zubná kefka nepoužívala dlhšie ako 3 mesiace, pred použitím ju úplne nabite podľa pokynov na nabíjanie.
- Ak svetelný indikátor rýchlo bliká, znamená to, že batéria zubnej kefky je vybitá. Zubnú kefku nabite.
- Ak chcete zubnú kefku nabíjať, vložte kábel USB do nabíjacieho portu na spodnej strane zubnej kefky a uistite sa, že je zubná kefka bezpečne zapojená.
- Indikátor nabíjania bude počas procesu nabíjania svietiť na bielo a pomaly blikáť. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor sa na dve minúty rozsvieti a prestane blikáť a po dvoch minútach sa automaticky vypne. Po úplnom nabití zubnej kefky ju možno používať dve minúty na jedno sedenie, dvakrát denne počas 25 dní.
- Zubná kefka má zabudovanú vodotesnú funkciu, takže ju môžete bezpečne používať v kúpeľni.

Úvod do režimov

- Prvý režim: Biela

V tomto režime sa rozsvieti biela kontrolka, náklon zubnej kefky je vysoký a intenzita vibrácií najvyššia. Je vhodný pre používateľov, ktorí majú vysoké požiadavky na čistiaci účinok a nemajú citlivé zuby.

- Druhý režim: Clean

V tomto režime svieti biela kontrolka, rotačný pohyb zubnej kefky je správne nastavený a intenzita vibrácií je stredná. Je vhodný pre správne fungujúce ústa na dosiahnutie najsilnejšieho čistiaceho účinku a udržiavanie zdravej ústnej hygieny.

- Tretí režim: Soft

V tomto režime svieti biely indikátor, pohyby kefky sú jemné a intenzita vibrácií je najjemnejšia z piatich režimov, čo je vhodné pre používateľov s citlivými zubami.

- Štvrtý režim: Poľský

V tomto režime sa rozsvieti biely indikátor, pohyb štetín a intenzita vibrácií sa rýchlo mení. Simulovaný efekt možno použiť na dodatočné ošetrenie oblasti rezákov, ktoré má bieliaci účinok.

- Piaty režim: Starostlivosť o ďasná

V tomto režime sa rozsvieti biely svetelný indikátor, kývavý pohyb štetín a intenzita vibrácií sa pomaly mení. Slúži to na jemnú stimuláciu na udržanie pevných a zdravých ďasien.

Špecifikácia

Prevádzková teplota: 0-50 °C
Prevádzkové napätie: DC 3,7
V Materiál štetín: Nylon
Vstupné napätie: DC 5,0 V
Menovitý výkon: 1,5 W
Odolnosť voči vode: IPX7

Bezpečnostné opatrenia

- Výrobok nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte bez automatickej registrácie.
- Ľudia, ktorí trpia vážnym ochorením parodontu alebo ktorí podstúpili chirurgický zákrok v ústnej dutine, by sa mali pred použitím prípravku poradiť s lekárom.
- Malé deti, dojčatá a osoby, ktoré nie sú schopné manipulovať s výrobkom, by mali byť pod dohľadom rodiča alebo dospeléj osoby.
- Výrobok nenamáčajte do vody na dlhší čas.
- Zubnú kefku nevystavujte vysokým teplotám ani slnečnému žiareniu.
- Netlačte štetiny pevne na zuby alebo dásna.
- Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.

DÔLEŽITÉ VYHLÁSENIA O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI

Pri používaní elektrických výrobkov, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich.

PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

NEBEZPEČENSTVO - na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom:

1. Výrobok vždy nabíjajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu vody.
2. Počas nabíjania nesaiahajte po výrobku, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte zariadenie od napájania.
3. Nikdy nenabíjajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou.
4. Pred pripojením k zdroju napájania sa uistite, že je nabíjací port suchý.

VAROVANIE - Aby ste znížili riziko popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia.

1. Nikdy nenechávajte výrobok pripojený k napájaniu bez dozoru.
2. Ak výrobok používajú deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, alebo ak sa používa na nich alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.

3. Výrobok používajte len na určený účel, ako je opísané v tejto príručke. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je uvedené výrobcom.
4. Nikdy nepoužívajte tento výrobok, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, spadol, bol poškodený alebo spadol do vody. Výrobok vráťte na opravu.
5. Kábel držte mimo vyhrievaných povrchov.
6. Nikdy nepoužívajte výrobok počas spánku alebo ospalosti.
7. Do otvorov alebo hadíc výrobku nikdy nevhadzujte ani nevkładajte žiadne predmety.
8. Zariadenie ani batériu nevystavujte nadmerným teplotám.
9. Spotrebič môžu používať deti vo veku 12 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú pod dohľadom a/alebo rozumejú príslušným rizikám.
10. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
11. Tento spotrebič obsahuje nevymeniteľnú batériu. Po skončení životnosti batérie je potrebné zariadenie riadne zlikvidovať.
12. Spotrebič sa môže prevádzkovať len pri bezpečnom, veľmi nízkom napätí v súlade s označením na spotrebiči.
13. Používajte napájací zdroj s výkonom maximálne 15 W.
14. Dávajte pozor na riziko skratu svoriek zariadenia napájaného z akumulátora.
15. V prípade poškodenia alebo úniku z batérie zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak sa tak stane, okamžite ich opláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
16. Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.

ZACHOVAJTE TIETO POKYNY

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nebalosti.