





Rotačná zubná kefka so sadou špičiek a puzdrom Bitvae R2

Návod na obsluhu

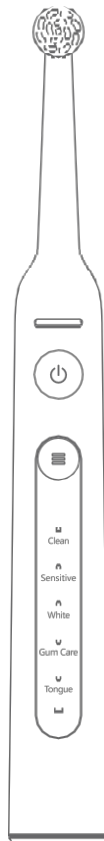

Popis produktu

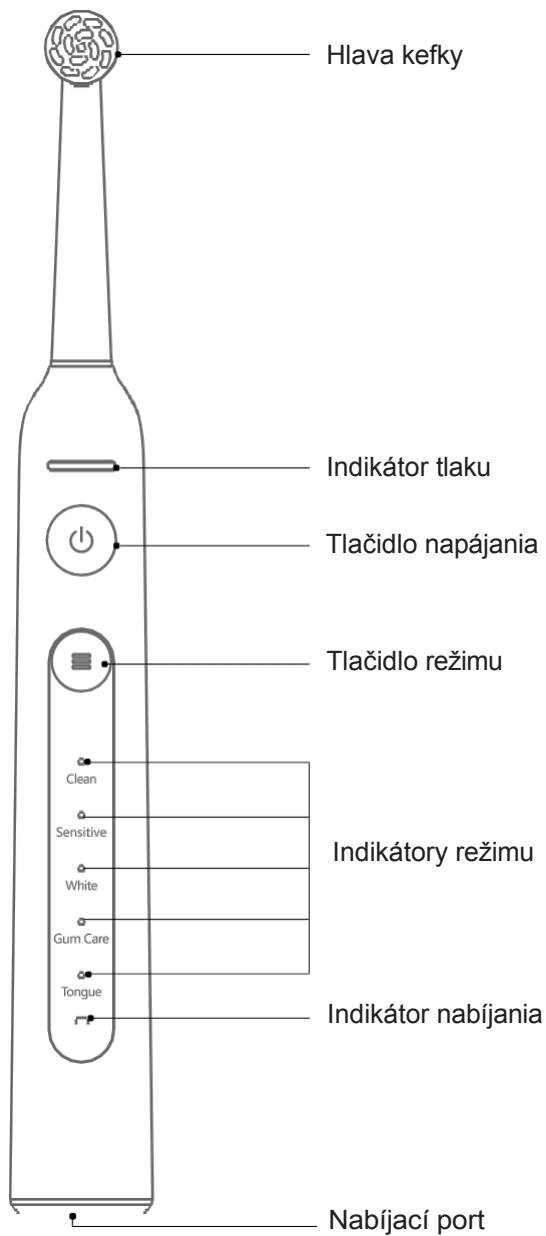

Špecifikácia

Model: R2

Menovitý výkon: 2 W

Režimy: 5 režimov (Clean, Sensitive, White, Gum Care, Tongue)

Vodotesnosť: IPX7

Typ nabíjania: Vstupné napätie:

USB 5V1A

Rozmery výrobku: Čistá hmotnosť: 146 g

Podmienky skladovania: izbová teplota, suché, vetrané miesto

Vlastnosti produktu

5 režimov

Clean: Štandardný režim čistenia, ktorý účinne odstraňuje zubný povlak. Vhodný pre používateľov, ktorí dbajú na ústnu hygienu.

Sensitive: Jemný režim chráni ďasná používateľa. Jemne a dôkladne čistí citlivé oblasti úst.

Biela: Zuby sú hladké a biele.

Starostlivosť o ďasná: Režim starostlivosti o ďasná vychádza z predpokladu optimálnych výsledkov čistenia a masíruje ďasná otáčaním zubnej kefky s frekvenčnou premenou. To pomáha stimulovať krvný obeh, čo má pozitívny vplyv na ďasná.

Jazyk: Účinne odstraňuje baktérie z povrchu jazyka a zlepšuje celkové zdravie ústnej dutiny.

Inteligentný indikátor tlaku

Ak je na zuby vyvíjaný príliš veľký tlak, rozsvieti sa indikátor tlaku. Rozsvieti sa, aby vám pripomenul, že máte znížiť tlak na zuby a zabrániť poškodeniu ďasien.

Postupné zvyšovanie vibrácií

Aby sa zabránilo rozstrekovaniu zubnej pasty, frekvencia otáčania sa pri aktivácii každého režimu postupne zvyšuje.

Funkcia pamäte režimu

Predvolený režim spustenia zostáva rovnaký ako režim nastavený pri poslednom použití zubnej kefky.

Inteligentný časovač

Režimy "Clean", "Sensitive", "White" a "Gum Care" majú 2-minútový inteligentný časovač s 30-sekundovými intervalmi, ktorý vám pripomenie, aby ste zmenili oblasť čistenia. Režim "Tongue Clean" trvá 20 sekúnd, čo poskytuje dostatok času na vyčistenie jazyka a odstránenie všetkých bielych zvyškov z jazyka.

Funkcia pripomenutia nízkeho nabitia

Keď sa batéria vybíja a vy zubnú kefku zapnete, indikátor nabíjania sa rozsvieti na červeno alebo sa zubná kefka správne nezapne, čo signalizuje, že sa batéria vybíja a pripomína vám, aby ste zubnú kefku nabili.

Prepät'ová ochrana

Ak je vstupné napätie príliš vysoké, zubná kefka prejde do stavu vlastnej bezpečnosti a proces nabíjania sa automaticky zastaví.

Pracovný čas

Doba prevádzky zubnej kefky na jedno nabitie je zvyčajne viac ako 30 dní po úplnom nabití (v režime "Sensitive" 2 minúty dvakrát denne).

Čas nabíjania

Pri nabíjaní cez USB sa zubná kefka úplne nabije do 3 hodín. Indikátor nabíjania

Počas nabíjania bude blikať indikátor nabíjania. Keď je zubná kefka úplne nabitá, indikátor nabíjania bude blikať bielo a potom zhasne.

Vodotesné

Vodotesná konštrukcia, stupeň vodotesnosti IPX7

Tipy na kefovanie

Pokyny na nabíjanie

Indikátor bliká na červeno - batéria sa vybíja, zubnú kefku nabite.

Indikátor pomaly bliká - zubná kefka sa nabíja.

Indikátor bliká bielo a potom sa vypne - Úroveň nabitia batérie zubnej kefky je dostatočná.

Poznámka: Výstupné napätie nesmie prekročiť 5,5 V. V opačnom prípade zariadenie vyhorí, čím sa natrvalo ukončí jeho životnosť.

Montáž alebo demontáž hlavíc kefiek



Tipy: Pri používaní zubnej kefky si vyberte vhodnú hlavicu zubnej kefky a každé 3 mesiace ju vymeňte za novú, aby ste dosiahli optimálny komfort starostlivosti o ústnu dutinu.

Montáž hlavy kefky: Zarovnajzte spodnú časť hlavy kefky s rukoväťou a mierne ju zatlačte, kým sa hlava kefky nezaistí v rukoväti.


Demontáž: Držte rukoväť kefy a vytiahnite hlavu kefy pozdĺž drieku.

1. Navlhčíte štetiny a naneste na ne 1 cm zubnej pasty.


Tipy: Pred zapnutím zubnej kefky vložte hlavicu kefky do úst, aby ste zabránili vypadnutiu a postriekaniu zubnou pastou.

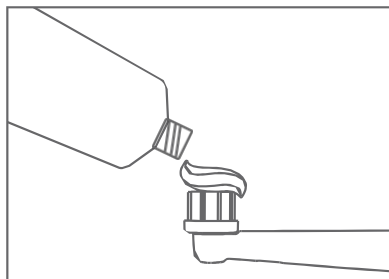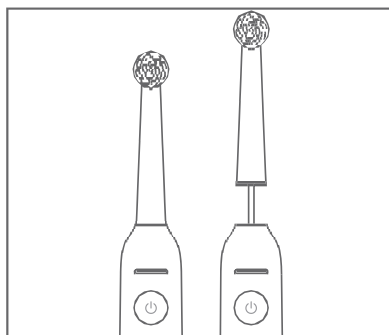


2. Umiestnite štetinu smerom k vonkajšej strane zuba pod uhlom 45° , ako je znázornené na obrázku, tak, aby štetina obopínala zub a gingiválny sulkus.

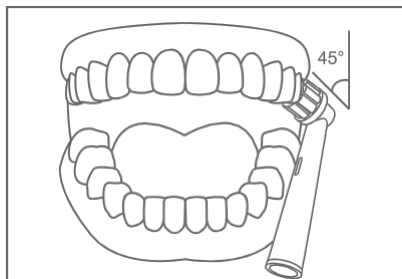


3. Krátko stlačte tlačidlo napájania na zubnej kefke, vyberte požadovaný režim a jemne pohybujte štetinkami z vnútornej strany zubov smerom von.

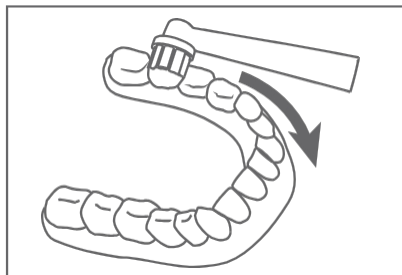

4. Vyčistite každú stranu zuba podľa 4 oblastí znázornených na obrázku.

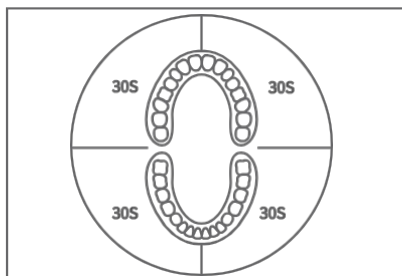

5. Po použití si vypláchnite ústa a zubnú kefku čistou vodou.

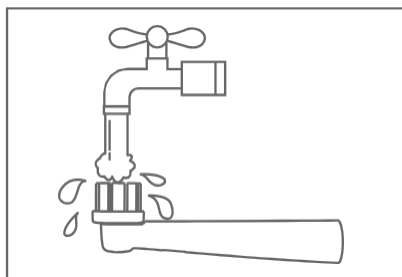

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní elektrických výrobkov, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich.

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

1. Pri prvom použití sa odporúča spustiť zubnú kefku v polohe režimu "Sensitive". Ak pocítite nepríjemné pocity alebo krvácanie ďasien, prestaňte výrobok používať a poraďte sa so svojím zubným lekárom.
2. Pri prvom použití zubnej kefky si ju nedávajte do úst skôr, ako skontrolujete úroveň nabitia batérie. Zubnú kefku zapnite, aby ste sa uistili, že je výrobok plne nabitý. Ak má zubná kefka nízku úroveň nabitia batérie alebo nie je nabitá vôbec, pred použitím ju úplne nabite.
3. Zubnú kefku nepoužívajte, neskladujte ani nenabíjajte v blízkosti ohňa alebo vysokých teplôt.
4. Neumiestňujte výrobok na dlhší čas do vlhkého prostredia alebo do kvapaliny, aby ste predišli poruchám výrobku.
5. Výrobok nerozoberajte, neopravujte, neopravujte ani neinštalujte iné príslušenstvo.
6. Chráňte výrobok pred pádom alebo silnými nárazmi.
7. Tento výrobok je určený len na čistenie ústnej dutiny, nepoužívajte ho na iné účely.
8. Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte výrobok počas nabíjania.
9. Uistite sa, že sa výrobok nabíja pomocou napájacieho zdroja DC 5V, 1A.
10. Pred nabíjaním zubnej kefky alebo jej pripojením k zdroju napájania sa uistite, že je nabíjací port alebo napájací zdroj dostatočne suchý.
11. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak je kábel poškodený alebo zubná kefka nefunguje, prestaňte ju používať.
12. V prípade kontaktu s pokožkou alebo poškodenia spôsobeného vytečením batérie okamžite prestaňte výrobok používať.
13. Prosím, nedávajte si výrobok do úst ani si nečistite zuby, keď ležíte. Môže to ľahko viesť k náhodnému prehltnutiu častí.
14. Deti by sa s týmto výrobkom nemali hrať ani ho rozoberať. Výrobok neumiestňujte na miesta prístupné deťom alebo dojčatám.
15. Drobné súčasti, ako napríklad ochranný kryt hlavy kefky, sú súčasťou balenia výrobku. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby nedošlo k ich prehltnutiu.
16. Ľudia, ktorí trpia závažným ochorením parodontu alebo podstúpili chirurgický zákrok v ústnej dutine, by sa mali pred použitím prípravku poradiť s lekárom.
17. Používatelia, ktorí majú problémy s kardiostimulátormi alebo inými implantovanými zariadeniami, by sa mali pred použitím tohto výrobku poradiť s lekárom.

18. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným rizikám.

19. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

20. Spotrebič obsahuje nevymeniteľnú batériu. Po skončení životnosti batérie je potrebné zariadenie riadne zlikvidovať.

21. Spotrebič sa môže prevádzkovať len pri bezpečnom, veľmi nízkom napätí v súlade s označením na spotrebiči.

22. Používajte napájaciu jednotku s výstupným výkonom nepresahujúcim 15 W.

23. Zariadenie ani batériu nevystavujte príliš vysokým teplotám.

24. Dávajte pozor na riziko skratu kovových predmetov na svorkách zariadenia napájaného z akumulátora alebo batérie.

NEBEZPEČENSTVO - na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom

1. Výrobok vždy nabíjajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu vody.

2. Počas nabíjania nesiahajte po výrobku, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte zariadenie od napájania.

3. Nikdy nenabíjajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou.

4. Pred pripojením k zdroju napájania sa uistite, že je nabíjací port dostatočne suchý.

VAROVANIE - Aby ste znížili riziko popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia:

1. Nikdy nenechávajte výrobok pripojený k napájaniu bez dozoru.

2. Ak výrobok používajú deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, alebo ak sa používa na nich alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.

3. Výrobok používajte len na určený účel, ako je opísané v tejto príručke. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je uvedené výrobcom.

4. Nikdy nepoužívajte tento výrobok, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol, bol poškodený alebo spadol do vody. Výrobok vráťte na opravu.

5. Kábel držte mimo vyhrievaných povrchov.

6. Nikdy nepoužívajte výrobok počas spánku alebo ospalosti.

7. Do otvoru alebo hadice nikdy nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety.

TIETO POKYNY SI PROSÍM UCHOVAJTE.

Poznámka: Výrobok, príslušenstvo, používateľské rozhranie a ďalšie obrázky sú schematické schémy. Medzi výrobkom a schémou môže byť mierny rozdiel spôsobený aktualizáciami alebo inováciami výrobku. Akceptujte, prosím, skutočný objekt ako štandardný.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nebalosti.