

Fairywill

Model: E11

Sonická zubná kefka

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali sonickú zubnú kefku Fairywill E11. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte pokyny a návod na použitie si uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.


1. Vlastnosti:

- Vodotesný a protišmykový dizajn.
- Vymeniteľné hlavice kefy s jedinečným dizajnom štetín 3D tvaru a pripomienkou výmeny štetín, ktoré Vám pomôžu udržať Vaše zuby belšie a zdravšie.
- Vysokofrekvenčné vibrácie účinne odstraňujú zubný povlak, dodávajú zubom a ďasnám hĺbkové čistenie a bránia zápalu ďasien.
- USB nabíjanie, priateľské k cestovaniu a kompatibilné s globálnym napätím.
- Funkcia pripomenutia nízkej spotreby energie, keď je napätie batérie nízke, kontrolka bude stále rýchlo blikať alebo sa zubná kefka počas prevádzky nedá zapnúť, ako pripomenka nabitia zubnej kefy.
- 2-minútový inteligentný časovač s intervalovým pozastavením, ktorý každých 30 sekúnd upozorní na zmenu miesta čistenia.
- V zubnej kefke je zabudovaných 5 režimov: White, Clean, Sensitive, Polish a Massage. V kefke je zabudovaná aj funkcia pamäte režimu, čo znamená, že keď zubnú kefku zapnete, predvolený režim spustenia zostane rovnaký ako režim, ktorý bol nastavený v čase posledného vypnutia zubnej kefy.

—

2. Popis:

- 1 Hlavica zubnej kefy
- 2 ON/OFF tlačidlo
- 3 White - bielenie
- 4 Clean - čistenie
- 5 Sensitive - citlivé/jemné
- 6 Polish - leštenie
- 7 Massage - masáž
- 8 Kontrolka nabíjania
- 9 Rukoväť
- 10 Napájací konektor

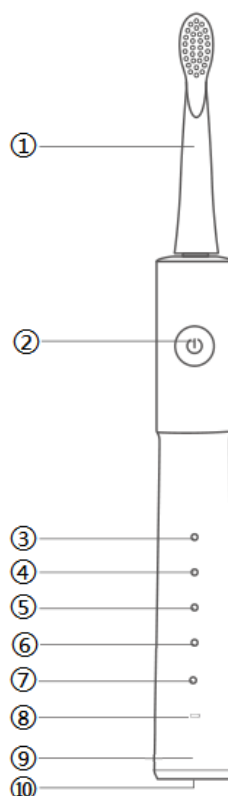

3. Používanie:

☆ Používanie kefy

- Posuňte hlavu zubnej kefy nadol k rukoväti a uistite sa, že je zaistená v správnej polohe.
- Zapnite zubnú kefku stlačením tlačidla „Power“.
- Prepínajte medzi 5 režimami („Biela, Čistý, Citlivý, Leštiaci a Masážny“) nepretržitým stláčaním tlačidla „Napájanie“.

- Navlhčite štetiny a naneste na kefku primerané množstvo zubnej pasty.
- Priložte štetinky so zubnou pastou k zubom pod miernym uhlom smerom k línii ďasien.
- Jemne pohybujte hlavicou kefky po zuboch na prednej, zadnej a všetkých žuvacích plochách. Kefka by sa mala nechať kĺzať po zuboch s minimálnym tlakom. Nevytvárajte príliš veľký tlak na zuby/ďasná ani neprikladajte štetiny na jednu oblasť úst na dlhší čas.
- Kefka má 2-minútový inteligentný časovač, pretože to odporúčajú zubní lekári ako optimálny čas na čistenie zubov a po každých 30 sekundách je k dispozícii intervalová prestávka ako pripomienka, aby ste sa presunuli do iného kvadrantu úst.
- Keď pocítite pauzu, prejdite na ďalšiu časť a zubná kefka sa po 2 minútach automaticky vypne.
- Aby ste zabránili striekaniu zubnej pasty, zapnite zubnú kefku až po priložení k zubom a vyberte ju z úst až po vypnutí.

☆ Výmena kefky

- Inštalácia: Posuňte hlavu zubnej kefky nadol smerom k rukoväti. Uistite sa, že je v správnej polohe.
- Odpojenie: Pevne uchopte základňu a potom vytiahnite hlavu zubnej kefky z rukoväte.

☆ Nabíjanie zubnej kefky

- Ak má zubná kefka pri prvom zapnutí vybitú batériu, pred použitím sa uistite, že je plne nabitá.
- Ak sa zubná kefka nepoužíva dlhšie ako 3 mesiace, pred použitím ju plne nabite podľa pokynov na nabíjanie.
- Ak kontrolka počas prevádzky rýchlo bliká, znamená to, že je batéria takmer vybitá, nabite kefku čo najskôr.
- Keď sa chystáte nabíjať zubnú kefku, zasuňte USB kábel do nabíjacieho portu v spodnej časti zubnej kefky a uistite sa, že je kefka bezpečne pripojená k elektrickej sieti.
- Indikátor nabíjania bude počas procesu nabíjania biely a pomaly bliká. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor sa na dve minúty rozsvieti a už nebude blikáť, po 2 minútach sa automaticky vypne. Po úplnom nabití zubnej kefky je možné ju používať dve minúty na sedenie, dvakrát denne po dobu 25 dní.
- V zubnej kefke je zabudovaná vodotesná funkcia, takže ju možno bezpečne používať v kúpeľni.

☆ Módy použitia

- **White - bielenie**

V tomto režime sa rozsvieti biela kontrolka v polohe režimu „White“, výkyv kefy je veľký a intenzita vibrácií je najsilnejšia. Je vhodný pre užívateľov, ktorí majú vysoké nároky na čistiaci účinok a nemajú citlivé zuby.

- **Clean - čistenie**

V tomto režime sa rozsvieti biela kontrolka v polohe režimu „Čistenie“, výkyvom

kefa je normálna a intenzita vibrácií je pri strednej rýchlosti. Je vhodný pre bežné stavy ústnej dutiny, pre dosiahnutie najsilnejšieho čistiacieho účinku a udržiavanie zdravej ústnej hygieny.

- **Sensitive - citlivé/jemné**

V tomto režime sa rozsvieti biela kontrolka v polohe režimu „Sensitive“, pohyb kefky je jemný a intenzita vibrácií je najjemnejšia z piatich režimov, čo je vhodné pre používateľov s citlivými zubami.

- **Polish - leštenie**

V tomto režime sa rozsvieti biela kontrolka v polohe „Poľský“, kývanie štetín a intenzita vibrácií sa rýchlo mení. Simulovaný efekt možno použiť na dodatočné ošetrovanie oblasti rezákov, ktoré má bieliaci účinok.

- **Massage - masáž**

V tomto režime sa v polohe režimu „Masáž“ rozsvieti biela kontrolka, štetiny sa hojdajú a intenzita vibrácií sa mení pomaly. Ide o jemnú stimuláciu, ktorá je určená na udržanie pevných a zdravých ďasien.

4. Špecifikácia:

Pracovná teplota: 0-50°C

Pracovné napätie: DC 3,7V

Materiál štetín: Nylon

Vstupné napätie: DC 5,0V

Menovitý výkon: 2W

Vodotesnosť: IPX7

5. Bezpečnostné upozornenia

- Ľudia, ktorí majú závažné ochorenie parodontu alebo majú operáciu v ústach, by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.
- Na batolátá, dojčatá a osoby, ktoré nie sú schopné prevádzky, by mal dohliadať rodič alebo dospelá osoba.
- Výrobok nenamáčajte vo vode na dlhší čas.
- Neumiestňujte zubnú kefku do prostredia s vysokou teplotou ani ju nevystavujte slnku.
- Netlačte štetiny silou na zuby alebo ďasná.
- Nevhodné pre deti do 12 rokov.

6. Popredajný servis

- 2-ročná záruka začína plynúť dňom zakúpenia. Ak áno, kontaktujte spoločnosť Fairywill ak je to nevyhnutné.



- V rámci záručnej doby pri akejkoľvek chybe materiálu alebo nefunkčnosti výrobku vymeníme diely alebo celý výrobok v závislosti od situácie a jeho stavu.
 - Keď žiadate o záručnú opravu, musíte spoločnosti Fairywill predložiť zubnú kefku a doklad o dátume nákupu (faktúru o kúpe).
 - Nasledujúce podmienky nie sú zahrnuté v záruke:
 - Škody spôsobené nesprávnym používaním, napríklad nesprávnym použitím napájacieho zdroja, zapojením do nesprávnej zásuvky, umelým poškodením atď.
 - Starnutie a opotrebovanie spôsobené bežným používaním.
 - Škody spôsobené používaním produktu na iné účely alebo použitím komponentov, ktoré nedodala Fairywill.
-