


Fairywill

Ústna sprcha - Návod na použitie

Ďakujeme za výber ústnej sprchy Fairywill Oral. Pred uvedením produktu do prevádzky si pozorne prečítajte návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

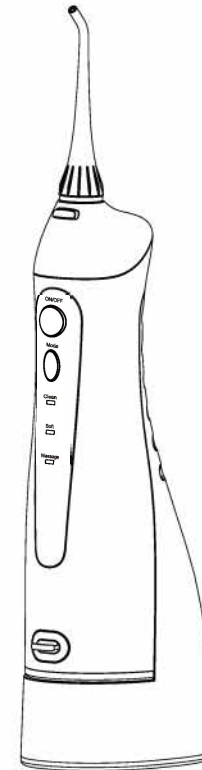

ISO9001 & ISO13485 Certificated Manufacturer



Printed in China

1. Dôležité bezpečnostné opatrenia:

Všetky informácie v tejto časti slúžia na to, aby vás poučili o správnej a bezpečnej prevádzke tohto zariadenia, aby ste sa vyhli zraneniu seba a iných osôb, ako aj škodám na majetku.


- Batofatá, dojčatá, ľudia, ktorí nie sú schopní zariadenie obsluhovať, ak ho sami nepoužívajú. Uchovávajú ho tiež mimo dosahu detí.
- Nikdy sa nepokúšajte meniť, rozoberať alebo opravovať zariadenie.
- Neumiestňujte ani neskladujte výrobok tam, kde spadne alebo skončí vo vani alebo umývadle
- Nesiahajte na výrobok, ak spadol do vody. Okamžite ho odpojte.
- Výrobok nepoužívajte pri kúpaní.

2. POZNÁMKY:

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú rizikám. zapojené.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie je možné používať iba s napájacím zdrojom dodaným so zariadením
- Pred likvidáciou musíte zo zariadenia vybrať batériu
- Pri vyberaní batérie musí byť zariadenie odpojené od napájania.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.
- Informácie o vyberaní batérie nájdete v časti „Likvidácia“ na strane 7.
- Nádržku nenapĺňajte vodou teplejšou ako 40°C
- Ak je vonkajší flexibilný kábel alebo kábel tohto transformátora poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Kábel udržiajte mimo horúcich povrchov.
- Prosím, nepoužívajte ju, ak stratíte trysku.
- Zariadenie neponárajte do vody.
- Nepoužívajte na iné účely ako na čistenie ústnej dutiny.
- Držte trysku mimo dosahu malých detí. Tryska je dostatočne malá na to, aby ju prehltla a môže sa dostať do hrdla.

- Neodporúča sa používať ústnu vodu, pretože je žieravá a môže ovplyvniť životnosť irigátora.
- Ľudia, ktorí pociťujú bolesť zubov alebo ďasien, nemusia byť schopní používať toto zariadenie a mali by sa pred použitím poradiť so svojím zubným lekárom.
- Trysku netlačte príliš silno na zuby alebo ďasná, poranili by ste si tým ďasná.

3. Designs:

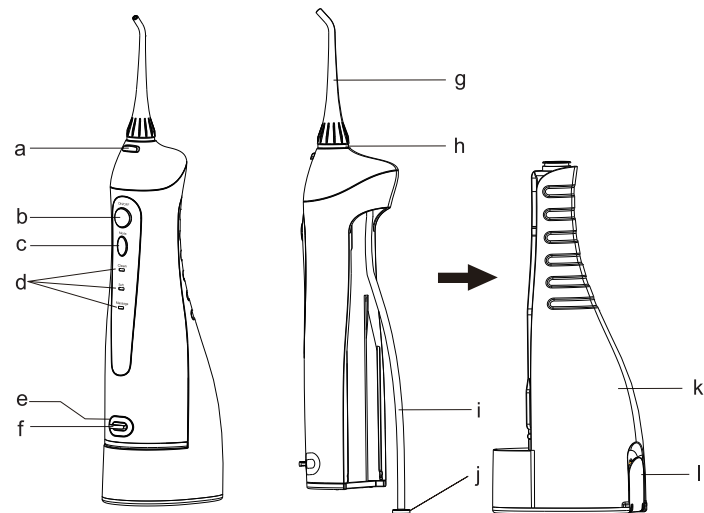

- a. tlačidlo uvoľnenia trysky
- b. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- c. Tlačidlo režimu
- d. Indikátor režimu
- e. Nabíjacia základňa
- f. Nabíjací základný kryt

- g. tryska
- h. identifikačný krúžok
- i. Nasávacía trubica dýzy
- j. Filter
- k. Nádrž na vodu (300 ml)
- l. Uzáver nádrže na vodu

Poznámka:

Vo vnútri hlavného zariadenia môže pred použitím zostať trochu tekutiny (nádrž, hadica na nasávanie vody atď.), toto je zvyšná destilovaná voda, ktorá bola použitá na test výkonu (prietok vody), takže neexistujú žiadne zdravotné problémy

4. Ako používať:

4.1 Nabíjanie zariadenia (ako obr. 1)

- Pred použitím zariadenia na čistenie vody pevne zakryte veko nádrže, aby ste zabránili úniku vody.
- Zložte spodný kryt nabíjačky a zasuňte zásuvku zariadenia (uistite sa, že v zástrčke zariadenia nezostala žiadna tekutina).
- Bezpečne zasuňte nabíjací adaptér do elektrickej zásuvky.
- Indikátor „CH“ bliká, keď zariadenie sa nabíja a po zapnutí sa vypne zariadenie je plne nabité.
- Znovu nasadte kryt na základňu nabíjačky po dokončení nabíjania.

Poznámka:

Ak indikátor „CH“ počas zavlažovania alebo po ňom bliká, znamená to, že je potrebné dobiť batériu. Úplné nabitie bude trvať približne 4 hodiny.

4.2 Použitie ústny irigátor

- Nasadte trysku na jednotku. (obr. 2)
 - Otvorte uzáver nádrčky na vodu, aby sa nádrž naplnila vodou, ktorá by nemala presiahnuť 40° C, potom uzáver zatvorte (obr. 3).
 - Alebo vysuňte nádržku na vodu z jednotky, naplňte nádrž vodou, ktorá by nemala presiahnuť 40 °C, potom nádrž pripevnite na jednotku. (obr. 4)
 - Stlačte tlačidlo "Mode" pre výber požadovaného režimu. Počas zavlažovania môžete zmeniť pracovný režim. (obr. 5)
- Čistenie: pri bežnom čistení vydrží približne 90 s (+/-1 Ss).
- Soft: na jemné čistenie citlivých ďasien na približne 11 Os (+/-1 Ss).
- Masáž: na čistenie a masáž ďasien po dobu približne 100 s (+/-15 s).
- Držte jednotku vo vzpriamenej polohe s hrotom trysky smerom k vašim zubom.
 - Ústa majte mierne pootvorené, aby voda mohla vytečť.

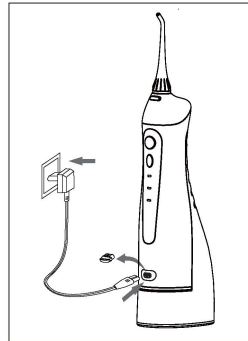


Fig. 1

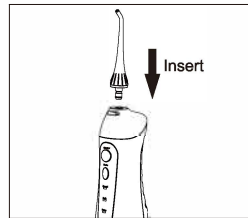


Fig. 2

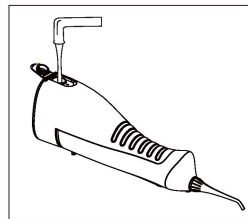


Fig. 3

- Stlačením tlačidla „On/Off“ spustíte sprchovanie(obr. 6).

- 1) Nasmerujte prúd vody pod 90-stupňovým uhlom na zuby a ďasná.
 - 2) Pomaly smerujte prúd vody pozdĺž zubov.
 - 3) Prúd vody nasmerujte pozdĺž línie ďasna s hrotom dýzy pod uhlom 90 stupňov k tkanivu ďasna.
 - 4) Dôkladné čistenie medzizubných priestorov a okolia strojčekov, korúnok alebo mostíkov.
- Stlačte tlačidlo „On/Off“ a potom stlačte tlačidlo uvoľnenia dýzy, aby ste v prípade potreby vymenili ďalšie dýzy (obr. 7).
 - Po dokončení zavlažovania znova stlačte tlačidlo „On/Off“, aby ste zariadenie vypli.

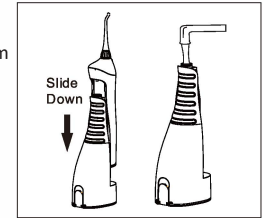


Fig. 4

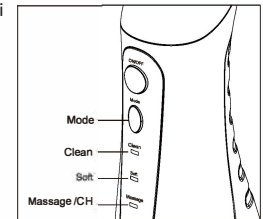


Fig. 5

4.3 Po použití spotrebiča (obr.8)

- Otvorte uzáver nádrčky na vodu a zlikvidujte vodu v nádrži.
- Stlačením tlačidla „On/Off“ zapnite jednotku a vypustite vodu vo vnútri zariadenia.
- Opätovným stlačením tlačidla „On/Off“ jednotku vypnite a zatvorte uzáver nádrčky na vodu.
- Zariadenie utrite suchou handričkou.

Poznámka:

Aby ste zabránili množeniu baktérií, uistite sa, že vo vnútri jednotky nezostala žiadna voda. Ak toto zariadenie nebudete používať pred uskladnením spotrebiča čo najskôr utrite a vysušte.

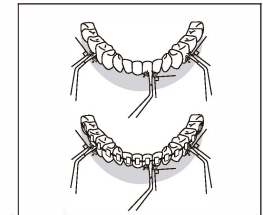


Fig. 6

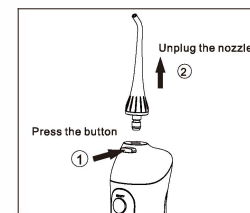


Fig. 7

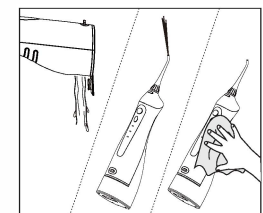


Fig. 8

5. Údržba:

Zariadenie je možné čistiť iba vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom. Nikdy nepoužívajte žieravé alebo abrazívne prostriedky (napr. ocot alebo odstraňovače vodného kameňa), pretože môžu poškodiť zariadenie. Na umývanie nepoužívajte horúcu vodu nad 50°C. Udržujte zariadenie mimo oblastí s vysokou teplotou a vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.

5.1 Hlavná jednotka

- Odstráňte nečistoty pomocou handričky s tekutým mydlom na čistenie jednotky a suchej handričky na utretie.
- Pri čistení hlavnú jednotku neponárajte do vody.
- Po umytí vodou jednotku vysušte.

5.2 Uzáver nádrže na vodu

Všetku špinu a špinu utrite handričkou.

5.3 Tryska

- Umyte vodou a utrite mäkkou handričkou.
- Trysku vymeňte každých 6 mesiacov.

5.4 Hadica na nasávanie vody

- Umyte vodou a utrite mäkkou handričkou.
- Hadičku neohýbajte, neťahajte ani neskrúčajte.

5.5 Nádrž

- Umyte vodou a utrite mäkkou handričkou.
- Vysušte nádrž, keď sa dlhší čas nepoužíva.


6. Riešenie problémov:

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nefunguje	Práve ste si zakúpili produkt alebo ste ho nepoužívali dlhšie ako 3 mesiace.	Jednotku nabíjajte aspoň 4 hodiny.
Funguje len niekoľko minút aj po nabití	Batéria dosiahla koniec cyklu zdvíhu.	Pre podporu kontaktujte servisné stredisko.
	Doba nabíjania bola nedostatočná.	Jednotku nabíjajte aspoň 4 hodiny.
Tlak vody je veľmi nízky	Je v nej uviaznutá špina tryskou	Vymeňte trysku
	Tryska je deformovaná	
	Vo filtrí sú uviaznuté nečistoty	Vyčistite filter
Voda nevyteká	Nádrž je prázdna	Naplňte nádrž
	Spotrebič je počas používania príliš naklonený	Používajte so spotrebičom vo vertikálnom stave

7. Likvidácia:





Nabíjateľná batéria vo vnútri vášho spotrebiča sa dá ľahko vybrať a recyklovať. Na konci životnosti výrobku a pred likvidáciou vyberte nabíjateľnú batériu z rukoväte podľa nižšie uvedených pokynov. Počas nižšie uvedenej operácie si chráňte oči, ruky, prsty a povrch, na ktorom pracujete.

- Odstráňte 2 kusy gumených nožičiek na spodnej časti rukoväte (ako II na obr. 9)
- Vložte skrutkovač do otvoru v spodnej časti rukoväte a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek uvoľnite spodný uzáver. (Ako @ na obr. 9)
- Posuňte nádržku na vodu zo zariadenia a odskrutkujte dve skrutky vedľa sacej trubice. (Obr. 10)

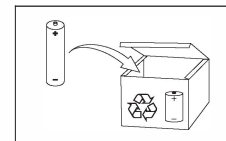

- Otvorte horný kryt a vložte vnútornú časť von z jednotky, potom odskrutkujte všetky skrutky vnútornej časti. (Obr. 11)
- Odrežte vedenie batérie a vyťahnite batérie z vnútornej časti. (Obr. 12)

Ak máte otázky týkajúce sa recyklácie, obráťte sa na miestnu kanceláriu odpadového hospodárstva.

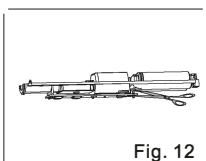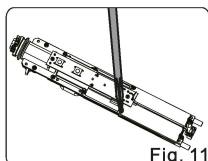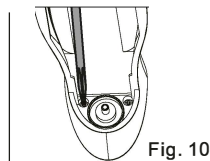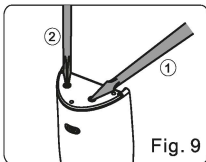

8. Záruka

- Poskytuje sa 2-ročná záruka od prvého dňa nákupu. Môžete kontaktovať Fairywill.
- Počas záručnej doby, pre akúkoľvek chybu, ktorá môže vyplývať z materiálu alebo procesu produktu, vymeníme diely alebo celý produkt podľa určitých okolností.
- Keď žiadate o bezplatnú opravu, musíte spoločnosti Fairywill predložiť produkt a dôkaz, ktorý môže preukázať dátum nákupu.
- Nasledujúce podmienky nie sú zahrnuté v záruke:
 - Škody spôsobené nesprávnym používaním, napríklad nesprávnym použitím napájacieho zdroja, zapojením do nesprávnej zásuvky, umelým poškodením atď.
 - Starnutie a bežné opotrebovanie používaním.
 - Problémy sa vyskytujú v dôsledku jeho použitia na iné účely, alebo nesprávneho použitia alebo použitia komponentov nedodávaných spoločnosťou Fairywill.
- Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva.

9. Kontakt

- Facebook: Fairywill
- Website: www.fairywill.com
- Email: support@fairywill.com

Made in China

Distributed by:

Zhuhai Zonghengyoupin Kuajingdianshang
Youxianggongsi, Zhuhai,
Guangdong, 519031, CN



Printed in China