



Model: 507

Elektrická sonická zubná kefka

Návod na použitie

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Pred použitím si poorne prečítajte návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

1. Vlastnosti

- Sonické vibrácie, viac ako 40 000 pohybov za minútu, dynamické čistenie.
- Počas jedného týždňa odstráňte až o 100 % viac povlaku. *
- Zlepšite zdravie ďasien už za 2 týždne. *
- Dosiahnite výrazne belšie zuby už za 2 týždne. *

- 5 režimov: biely, čistý, citlivý, leštenie a masáž.
 - Jediný dizajn štetín zvlnených zubami na dôkladné čistenie ďasien a ťažko dostupných miest.
 - 2-minútový inteligentný časovač s pripomenutím intervalovej pauzy 30 sekúnd.
 - Vymeniteľná hlavica zubnej kefky.
 - Vodotesnosť IPX7.
 - USB nabíjanie, jednoduché a pohodlné použitie doma resp cestovaním.
 - Batéria s dlhou výdržou, 1 nabitie na približne 30 dní používania
- *v porovnaní s bežnou zubnou kefkou.

2. Dizajn

- ① Hlavica zubnej kefky
- ② Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- ③ White - režim bielenia
- ④ Clean - režim čistenia
- ⑤ Sensitive - citlivý režim
- ⑥ Polish - režim leštenia
- ⑦ Massage - režim masáže
- ⑧ Kontrolka nabíjania
- ⑨ Konektor nabíjania



3. Používanie


☆ Using the toothbrush

- Nasadíte hlavicu kefky a uistite sa, že je zaistená na svojom mieste.
- Vyberte si preferovaný režim stlačením tlačidla „Napájanie“. Nepretržitým stláčaním môžete prepínať medzi 5 režimami „White, Clean, Sensitive, Polish a Massage“.
- Navlhčite štetiny a naneste primerané množstvo zubnej pasty.
- Štetiny so zubnou pastou priložte k zubom pod miernym uhlom k línii ďasien.
- Stlačením tlačidla „Power“ zapnite.
- Jemne pohybujte hlavicom kefky po zuboch na prednej, zadnej a žuvacej ploche. Nevývíjajte na zuby príliš veľký tlak ani neprikladajte štetiny na jedno miesto na dlhší čas.
- Zubní lekári odporúčajú na čistenie zubov 2 minúty a po každých 30 sekundách je intervalová pauza pripomínajúca.
- Keď pocítite pauzu, prejdite na ďalšiu časť a zubná kefka sa automaticky vypne po 2 minútach.
- Aby ste zabránili striekaniu zubnej pasty, zapnite zubnú kefku až po priložení k zubom a vyberte ju z úst až po vypnutí.

☆ Výmena hlavy zubnej kefky


- Inštalácia: Posuňte hlavu zubnej kefky nadol k rukoväti. Otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa A nestretne s T.
- Odpojenie: Otočte hlavu zubnej kefky proti smeru hodinových ručičiek, kým sa A stretne s B. Vytiahnite ju pozdĺž rukoväte.

Install

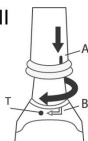

2

Detach

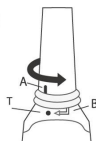

☆ Nabíjanie zubnej kefky

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, indikátor nabíjania 10-krát zabliká, aby pripomenul nabíjanie.
- Pripojte zubnú kefku pomocou USB kábla k akémukoľvek zdroju napájania a začnite nabíjanie so zapnutým indikátorom nabíjania.
- Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka automaticky zhasne a nabíjacia jednotka sa automaticky vypne, aby sa predišlo prebýjaniu.
- Pri prvom použití alebo pri dlhšom nepoužívaní je normálne, že sa indikátor prvých 5 minút nerozsvieti.

4. Špecifikácia

Napájanie: DC3.7V

Materiál: ABS/TPE

Štetiny: Nylon

Spotreba: 1.0W

Pracovná teplota: 0-50°C

5. Opatrenia

- Produkt bez povolenia nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Ľudia, ktorí majú závažné periodontálne ochorenie alebo chirurgický zákrok v ústach, by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.
- Na batofatá, dojčatá a osoby, ktoré nie sú schopné prevádzky, by mal dohliadať rodič alebo dospelá osoba.
- Nenamáčajte výrobok na dlhší čas vo vode.
- Neumiestňujte zubnú kefku do prostredia s vysokou teplotou ani ju nevystavujte slnku.
- Netlačte štetiny silno na zuby alebo ďasná

6. Popredajné služby

- Poskytujeme sa 2-ročná záruka odo dňa kúpy. Môžete kontaktovať predajcu.
 - Počas záručnej doby, v prípade akýchkoľvek chýb spôsobených materiálom alebo výrobným procesom, vymeníme diely alebo celý produkt podľa špecifických okolností.
 - Keď žiadate o bezplatnú opravu, musíte spoločnosti predložiť produkt a dôkaz, ktorý môže preukázať dátum nákupu (faktúra za nákup).
 - Nasledujúce podmienky nie sú zahrnuté v záruke:
 - Škody spôsobené nesprávnym používaním, napríklad nesprávnym použitím napájacieho zdroja, zapojením do nesprávnej zásuvky, umelým poškodením atď.
 - Starnutie a opotrebovanie spôsobené bežným používaním.
 - Problémy sa vyskytujú v dôsledku jeho použitia na iné účely, alebo nesprávneho použitia alebo použitia komponentov nedodaných spoločnosťou Fairwill.
-