

Fairywill


Model: 2001
Sonická zubná kefka

Ďakujeme, že ste si vybrali sonickú zubnú kefku Fairywill 2001. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte pokyny a návod na použitie si uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

1. Vlastnosti:

- Účinne čistí zuby a ďasná s frekvenciou vibrácií 38 000-krát za minútu.
- Zahŕňa 3 režimy (nízky, vysoký a masážny) pre splnenie rôznych požiadaviek.
- Protišmykové - ľahké, pevné uchopenie a ergonomický dizajn.
- Vodotesnosť IPX7.
- Vysoká úroveň bezpečnosti, pretože funguje s odolnou Ni-MH výmenou. Výdrž batérie môže trvať 21 dní pri plnom nabití a má indikátor nízkej úrovne výmeny. Súčasťou produktu je aj USB nabíjací kábel.
- Inteligentný časovač vám každých 30 sekúnd pripomenie, aby ste zmenili oblasť čistenia.
- Kefa sa automaticky vypne po 2 minútach, aby sa zachoval presný čas čistenia.

2. Popis produktu:

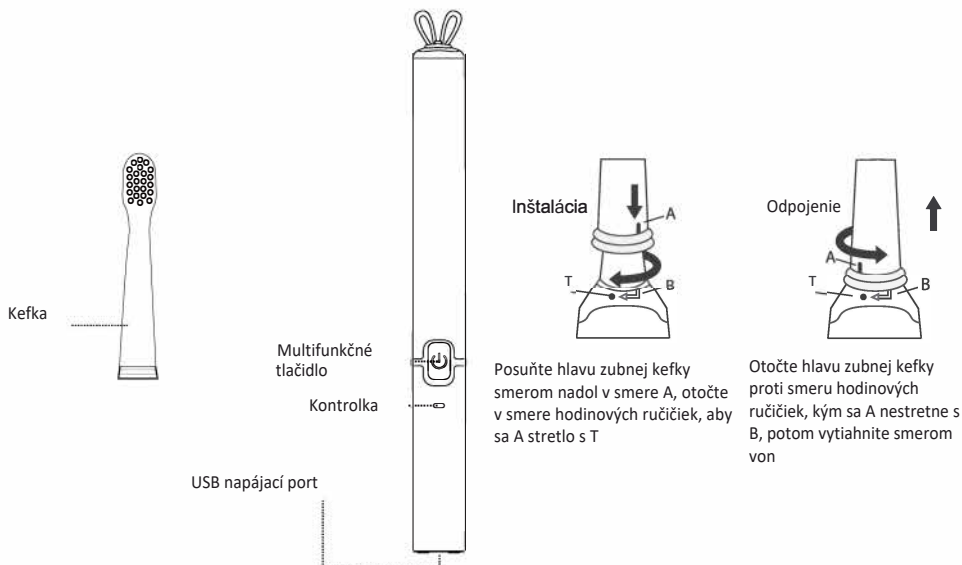

3. Dôležité bezpečnostné opatrenia:

- Pri prvom použití zubnej kefky môžu niektorí ľudia potrebovať čas na prispôsobenie sa kefke a môžu pociťovať pocity, ako je necitlivosť. Toto je bežná vec, ktorá sa objaví pri prvom používaní. Pocity by mali po niekoľkých použitíach vymiznúť a do týždňa by ste si mali zvyknúť.
- Neotvárajte, neopravujte ani neupravujte výrobok bez toho, aby ste vyhľadali odbornú pomoc.
- Neudierajte do produktu a nenechajte ho spadnúť. Ak je chybný, prestaňte ho používať.
- Pred nabíjaním produktu skontrolujte, či je produkt kompatibilný s miestnym napätím vo Vašej oblasti.
- K tomuto produktu sa hodia iba niektoré hlavice zubnej kefky.
- Ak ste mali operáciu ďasien alebo ústnej dutiny v posledných dvoch mesiacoch, poraďte sa pred jej použitím so svojím zubným lekárom.
- Ak po použití zubnej kefky zaznamenáte krvácanie alebo ak krvácanie trvá dlhšie ako jeden týždeň, ihneď sa poraďte so svojím zubným lekárom.
- Produkt je určený len na čistenie zubov, ďasien a jazyka a nie na iné účely.
- Deti by mali byť pri používaní zubnej kefky pod dozorom, aby sa zabezpečilo správne a bezpečné používanie. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, keď ho nepoužívate.
- Nevystavujte zubnú kefku vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.

4. Špecifikácia:

Pracovná teplota: 0-50 °C

Pracovné napätie: DC1.2V

Štetiny: Nylon

Vstupné napätie: DCS.0V

Input power: 0,6W

Spotreba: 0,55W

Doba nabíjania: :::6 hodín

5. Ako používať:

- Pripojte produkt k zdroju napájania pomocou kábla USB a nabite produkt.
- Nasadte hlavu zubnej kefky na rukoväť a uistite sa, že je zaistená na správnom mieste. Navlhčite štetiny a naneste zubnú pastu.
- Hlavu kefky si jemne priložte na zuby.
- Jemne pohybujte hlavicou kefky po zuboch, pričom si čistíte prednú, zadnú a žuvaciu plošku až 10 sekúnd.
- Stlačením multifunkčného tlačidla zapnete zubnú kefku a vyčistíte všetky jej povrchy zuby
- Stlačením multifunkčného tlačidla zmeníte režim čistenia:
 - Nízka: Oveľa šetrnejšie čistenie zubov, jazyka a citlivých oblastí. (Indikátor je zelený)
 - Vysoká: Ďaleko efektívne čistenie zubov. (kontrolka je červená)
 - Masáž: Jemná stimulácia navrhnutá tak, aby udržala Vaše ďasná pevné a zdravé. (modrá kontrolka)

• Keď sa automatické pripomenutie každých 30 sekúnd nakrátko zastaví, presuňte kefku do ďalšej oblasti. Po dokončení všetkých 4 oblastí sa kefka automaticky vypne do 2 minút.

6. Nabíjanie

- Keď je batéria slabá, indikátor nabíjania 10-krát zabliká.
- Počas nabíjania zostane kontrolka červená. Po úplnom nabití sa svetlo rozsvieti na zeleno, čo znamená, že batéria je plne nabitá. Po úplnom nabití zubnej kefky sa nabíjacia jednotka vypne, aby sa zabránilo prebitiu.
- Pri prvom použití alebo v prípade, že batéria bola dlhý čas na nízkej úrovni, je normálne, ak kontrolka počas prvých 5 minút nebliká.

7. Popredajný servis:

- 2-ročná záruka začína dňom zakúpenia, v prípade potreby kontaktujte spoločnosť predajcu.
- V rámci záručnej doby, akékoľvek chyby spôsobené materiálom alebo výrobným procesom, vymeníme diely alebo celý výrobok v závislosti od stavu.
- Keď žiadate o bezplatnú opravu, musíte predajcovi predložiť doklad s dátumom nákupu (faktúru za nákup).
- Nasledujúce podmienky nie sú zahrnuté v záruke:
 - Škody spôsobené nesprávnym používaním, napríklad nesprávnym použitím napájacieho zdroja, zapojením do nesprávnej zásuvky, umelým poškodením atď.
 - Starnutie a opotrebovanie spôsobené bežným používaním.
 - Škody spôsobené používaním produktu na iné účely alebo použitím komponentov, ktoré nedodala Fairywill.

8. Contact:

 Fairywill

 www.fairywill.com

 support@fairywill.com

Made in China

Distributed by:

Zhuhai Zonghengyupin Kuajingdianshang Youxiangongsi, Zhuhai, Guangdong, 519031, CN